




## NAVODILO ZA IZVEDBO CELOFANSKEGA BRISA

Glista podančica (*Enterobius vermicularis*), v primeru, da je prisotna ponoči zleze iz črevesja in v področje anusa oziroma zadnjika leže jajčeca. Jajčeca so lepljiva in ostanejo v tem področju nalepljena. Jajčeca tega črevesnega parazita, se z razliko od ostalih, ne izloča z blatom, zato je izvedba celofanskega brisa edini način s katerim lahko dokažemo okuženost z glisto podančico.

Postopek:

1. Zvečer opravite običajno higieno in področje zadnjika **NE** mažite s kremo.
2. Zjutraj preden otrok urinira, se iztreblja ali umiva naredite celofanski bris.

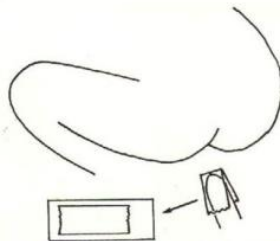

3. Vzamete kos **prozornega** (**NE** matiranega) lepilnega traka (selotejpa). Trak naj bo dolg približno 5 - 10 cm.
4. Nadenite si rokavice za enkratno uporabo.
5. Lepilni trak si ovijte okoli prsta tako, da je lepilni trak obrnjen z lepiljivo stranjo navzven in se en konec traku prične na blazini prsta, drug konec traku pa konča na koncu nohta.

**NAVODILO SE NADALJUJE NA NASLEDNJI STRANI!**

Pripravl/a:

Pregledal/a in odobril/a:

**VERZIJA 2**

Katarina Furar, dipl. ing. lab. biomed.

Špela Sajko, univ. dipl. biol., spec. med. biokem.

Podpis:



**MEDICINSKI  
LABORATORIJ**

**NAVODILO ZA IZVEDBO  
CELOFANSKEGA BRISA**

16.1.2018

6. Razprete ritnici in temeljito, z lepljivo stranjo lepilnega traka, pritisnite na kožo okoli zadnjika.
7. Lepilni trak nalepite na stekleno ploščico, ki ste jo dobili v laboratoriju tako, da je med stekleno ploščico in lepilnim trakom čim manj mehurčkov.
8. Lepilnega traku ne prilepljajte na obe strani steklene ploščice.
9. Če je, potem ko ste lepilni trak prilepili na stekleno ploščico predolg, ga odstrizite.
10. Snemite rokavice.
11. Ploščico s celofanskim brisom vstavite v vrečko za prenos kužnin, ki ste jo dobili v laboratoriju.



12. Vrečka ima **dva predalčka**. V **enem dobite stekleno ploščico – v ta predalček tudi vložite stekleno ploščico!!! po odvzemu celofanskega brisa**. V drugem pa imate navodila za izvedbo celofanskega brisa in morebitne laboratorijske nalepke.
13. Celofanski bris čim prej dostavite v laboratorij.
14. **Pred laboratorijem** vrečke s celofanskim brisom **NE odlagajte** v sprejemni predalček ali sprejemni pult. Prosimo počakajte na osebje laboratorija, da bo celofanski bris sprejelo.
15. Po oddaji celofanskega brisa si razkužite roke z razkužilom, ki se nahaja na sprejemnem pultu laboratorija.

Pripravl/a:

Pregledal/a in odobril/a:

Katarina Furar, dipl. ing. lab. biomed.

Špela Sajko, univ. dipl. biol., spec. med. biokem.

**VERZIJA 2**

**Podpis:**